



Massagepistole

mit wärmender und kühlender Funktion



BEDIENUNGSANLEITUNG

15/2024

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Verwendete Symbole	3
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
4. Sicherheitshinweise	5
5. Lieferumfang / Teilebeschreibung	8
6. Lieferumfang prüfen	8
7. Akku aufladen	9
8. Massagepistole verwenden	10
9. Anwendungsbereiche	12
10. Reinigung und Wartung	13
11. Aufbewahrung	13
12. Entsorgungshinweise	13
13. Technische Daten	15

1. Allgemeines



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die Massagepistole mit wärmender und kühlender Funktion nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil der Massagepistole mit wärmender und kühlender Funktion. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die Massagepistole an einen anderen Benutzer weitergeben. Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Für eine verbesserte Lesbarkeit wird die Massagepistole mit wärmender und kühlender Funktion im Folgenden mit Massagepistole bezeichnet.

2. Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Massagepistole oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen und Tipps hin.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse anfordern.



Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Batterien nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Mit diesem Symbol markierte Artikel dürfen nur in Innenräumen verwendet werden.



Dieses Symbol kennzeichnet Artikel, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Herstellungsdatum



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahrgut mit einem Lithium-Ionen-Akku.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Massagepistole wurde zur Selbstmassage konzipiert und dient dem Lösen von Verspannungen und Verhärtungen. Die verschiedenen Massageköpfe eignen sich für die Massage von unterschiedlichen Körperbereichen, z.B. Schultern, Armen, Beinen und Rücken. Die Massagepistole ist nicht für den medizinischen, therapeutischen oder gewerblichen Bereich geeignet. Die Massagepistole ist kein Spielzeug. Verwenden Sie die Massagepistole nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

4. Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

- Verwenden Sie die Massagepistole nur in trockenen Innenräumen.
- Verwenden Sie die Massagepistole so, dass sie nicht in eine gefüllte Badewanne oder Waschbecken fallen kann.
- Tauchen Sie die Massagepistole nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie die Massagepistole regelmäßig auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie die Massagepistole nicht bei Beschädigungen, sondern wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Massagepistole vor.
- Versuchen Sie nicht, die Massagepistole zu öffnen.
- Halten Sie die Massagepistole von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Setzen Sie die Massagepistole niemals hohen Temperaturen (z.B. durch Heizung, Sonneneinstrahlung) oder Witterungseinflüssen (z.B. Regen etc.) aus.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in die Massagepistole hineingesteckt werden.
- Wenn Sie die Massagepistole nicht verwenden, sie reinigen, oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Massagepistole aus.

- Die Akkus sind fest in der Massagepistole eingebaut und dürfen nicht ausgetauscht werden. Versuchen Sie niemals die Massagepistole zu öffnen und an die Akkus zu gelangen.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder, Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Die Massagepistole kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Massagegeräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Massagepistole oder den Verpackungsbestandteilen spielen.
- Lassen Sie die Massagepistole nicht unbeaufsichtigt, wenn sie in Betrieb ist.

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Verwenden Sie die Massagepistole nicht an den folgenden Körperstellen: Hals, Genitalbereich, Kopf, Augen, Ohren, Nieren, Brustgewebe, Armbeugen, Achselhöhlen, Leistengegend und Kniekehlen.
- Verwenden Sie die Massagepistole nicht direkt auf den Knochen.
- Verwenden Sie die Massagepistole nicht an verletzten, schmerzhaften oder empfindlichen Körperstellen, z.B. bei Hauterkrankungen, Wunden oder Sonnenbrand.
- Brechen Sie die Massage ab, wenn Sie währenddessen Schmerzen verspüren oder sich unwohl fühlen.
- Die Massagepistole verfügt über eine Wärmefunktion. Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, müssen bei der Verwendung vorsichtig sein.
- Brechen Sie die Massage ab, wenn Ihnen der Thermo-Massagekopf zu heiß oder zu kalt ist. Führen Sie die Massage erst fort, wenn der Thermo-Massagekopf wieder eine angenehme Temperatur hat.

⚠️ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie in den folgenden Fällen das Massagerät nicht oder fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Massagegerät verwenden:

- bei medizinischen Implantaten oder Herzschrittmachern
- bei Gefäßerkrankungen, Durchblutungsstörungen, Osteoporose, Thromboseneigung, Diabetes, hohem Blutdruck, Nervenirritationen
- bei fieberhaften Erkrankungen
- bei einer Schwangerschaft

5. Lieferumfang / Teilebeschreibung

- 1 Massagegerät
- 2 Ladekabel
- 3 Anschlussbuchse
- 4 Vorrichtung für Massageköpfe
- 5 Display
- 6 Ladeanzeige
- 7 Ein-/Aus- und Modus-Taste
- 8 Touch-Taste + (Intensität erhöhen)
- 9 Touch-Taste – (Intensität verringern)
- 10 Massagekopf Kugel
- 11 Massagekopf Fläche
- 12 Massagekopf Kegel
- 13 Massagekopf Gabel
- 14 Thermo-Massagekopf
- 15 Temperatur-Kontrollleuchte

Aufbewahrungskoffer

Garantiekarte

Bedienungsanleitung


6. Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Massagepistole beschädigen. Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor.

Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Massagepistole Schäden aufweist. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Massagepistole nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

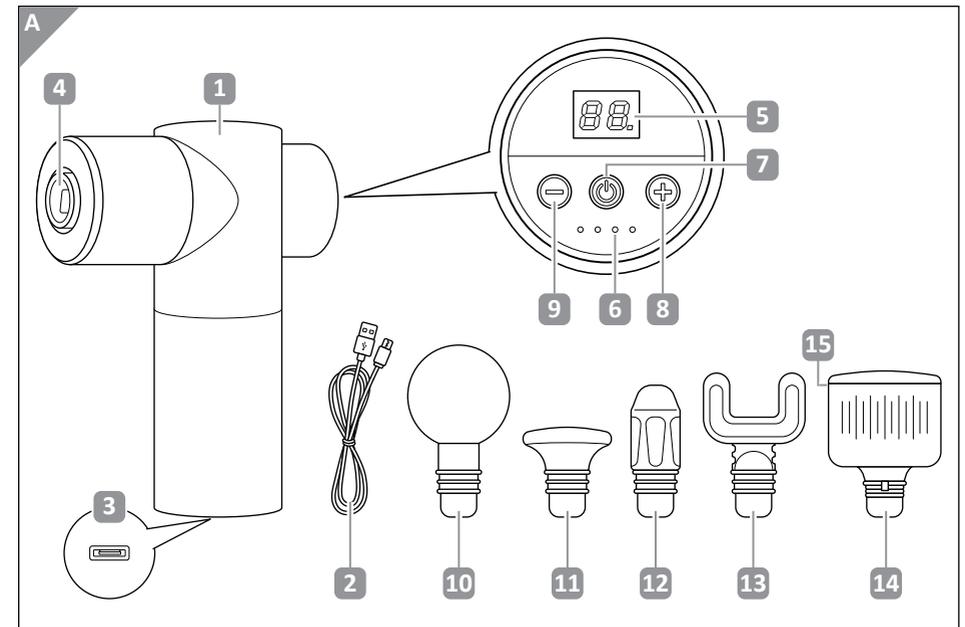

7. Akku aufladen

Bevor Sie die Massagepistole das erste Mal verwenden, müssen Sie den Akku vollständig aufladen. Laden Sie den Akku wieder auf, wenn die Balken der Ladeanzeige abnehmen.

1. Schließen Sie den USB-C Stecker des Ladekabels **2** an die Anschlussbuchse **3**.
2. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels **2** in ein geeignetes USB-Netzteil, das Sie an die Netzversorgung anschließen (Netzteil 5 V / 2 A; nicht im Lieferumfang enthalten). Der Akku beginnt aufzuladen. Die Ladeanzeige **6** blinkt und zeigt „CH“.
3. Leuchtet die Ladeanzeige **6** dauerhaft, ist der Akku vollgeladen. Trennen Sie das Ladekabel nach dem Ladevorgang vom Stromnetz und von der Massagepistole. Die Massagepistole kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

8. Massagepistole verwenden



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

- Eine zu lange Massage kann zu einer Überstimulation der Muskeln und zu Verspannungen führen. Verwenden Sie die Massagepistole nicht länger als 15 Minuten am Stück.

Massageköpfe aufsetzen / wechseln

Die Massagepistole verfügt über 5 verschiedene Massageköpfe für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Beachten Sie dazu die Abbildung im Kapitel „Anwendungsbereiche“. Dort finden Sie Informationen, für welche Körperstellen welcher Massagekopf geeignet ist.

1. Stecken Sie den gewünschten Massagekopf **10** – **14** auf die Vorrichtung **4** am Massagegerät **1** auf.
2. Um einen Massagekopf zu entfernen, ziehen Sie ihn von der Vorrichtung ab.

Ein-/Ausschalten

1. Drücken Sie ca. 2 Sekunden auf die Ein-/Aus- und Modus-Taste **7**.
Die Massagepistole schaltet sich ein. Auf dem Display wird die Vibrationsgeschwindigkeit mit „00“ angezeigt.
2. Drücken Sie auf die Touch-Taste + **8** um die Vibrationsgeschwindigkeit zu verstärken.
3. Drücken Sie auf die Touch-Taste – **9** um die Vibrationsgeschwindigkeit zu verringern.
4. Drücken Sie nochmal ca. 2 Sekunden auf die Ein-/Aus- und Modus-Taste **7**.
Die Massagepistole schaltet sich aus. Die Massagepistole lässt sich nur im Vibrationsmodus ausschalten.



Sie können zwischen dem Vibrationsmodus und dem Temperatur-Modus wechseln, indem Sie die Ein-/Aus- und Modus-Taste kurz drücken. Die Massagepistole verfügt über einen Auto-Stopp. Nach 15 Minuten schaltet sich die Massagepistole von selbst aus.


Wärme-/ Kältefunktion verwenden

1. Wenn Sie den Thermo-Massagekopf das erste Mal verwenden, ziehen Sie vorher die Schutzfolie ab.
2. Setzen Sie den Thermo-Massagekopf **14** auf die Massagepistole.
3. Drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus- und Modus-Taste **7**. Auf dem Display erscheint „P0“. Sie befinden sich im Temperatur-Modus.
4. Drücken Sie die Touch-Taste + **8** um den Thermo-Massagekopf zu erwärmen. Auf dem Display erscheint „H1“. Die Temperatur-Kontrollleuchte **15** leuchtet rot.
5. Drücken Sie die Touch-Taste + **8** ein weiteres Mal, um den Thermo-Massagekopf weiter zu erwärmen.
6. Drücken Sie die Touch-Taste – **9** um den Thermo-Massagekopf zu kühlen. Auf dem Display erscheint „C1“. Die Temperatur-Kontrollleuchte leuchtet blau.
7. Drücken Sie die Ein-/Aus- und Modus-Taste **7** um wieder in den Vibrationsmodus zu wechseln.



Es gibt jeweils drei Wärmemodi und drei Kühlmodi. Die Wärmemodi werden auf dem Display mit H1-H3 gekennzeichnet. Die Kühlmodi werden auf dem Display mit C1-C3 gekennzeichnet. Die Temperaturmodi werden mit der Temperatur-Kontrollleuchte farblich gekennzeichnet. Je wärmer die Temperatur, desto intensiver der Rotton. Je kühler die Temperatur, desto intensiver der Blauton.

9. Anwendungsbereiche

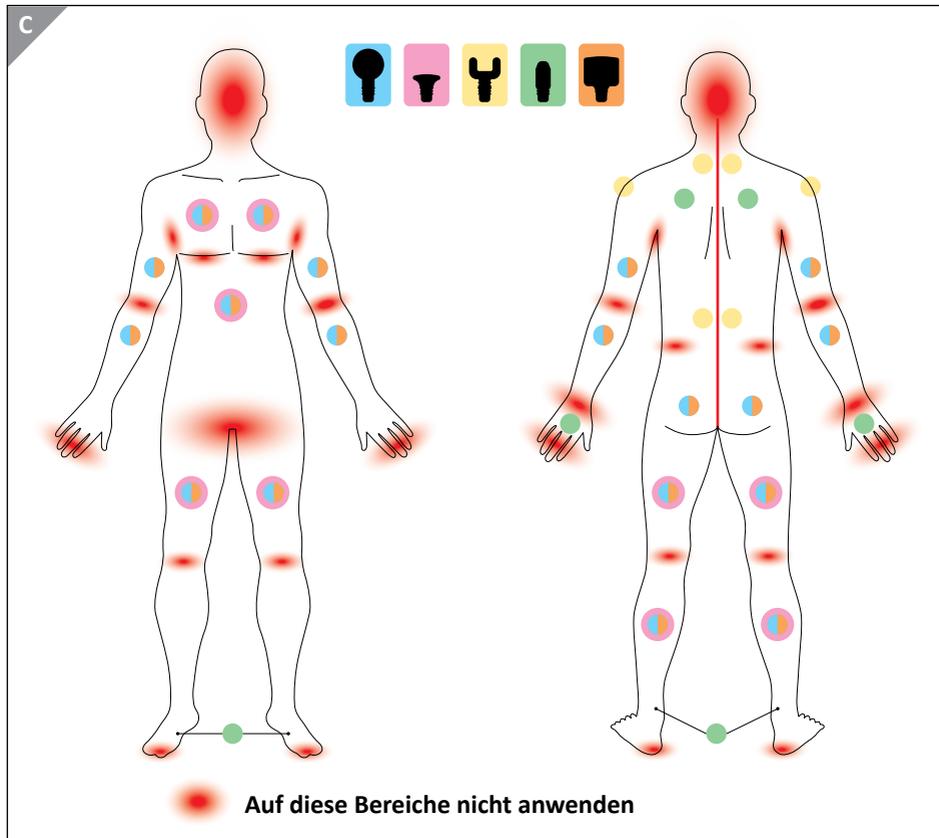

10. Reinigung und Wartung

Trennen Sie die Massagepistole vor jeder Reinigung vom Stromnetz. Reinigen Sie das Äußere der Massagepistole mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Lassen Sie die Massagepistole gut trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden. Überprüfen Sie die Massagepistole regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß und wenden Sie sich an den Kundenservice, falls Sie Beschädigungen feststellen. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Massagepistole vor. Ein Austausch von LEDs ist nicht möglich. Die Massagepistole kann auch mit defekten LEDs weiter betrieben werden.

11. Aufbewahrung

Lagern Sie die Massagepistole im dazugehörigen Koffer an einem trockenen und gut belüfteten Ort. Schützen Sie die Massagepistole vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie die Massagepistole für Kinder unzugänglich auf.

12. Entsorgungshinweise

Verpackung

Sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltenden Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

Altgeräte



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten.

Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertrieber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertrieber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertrieber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertriebers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien.

Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

13. Technische Daten

Akku: 3 x Li-Ion, 10,8 V , 2500 mAh; 27 Wh

Motordrehzahl: 1600 - 2800 U/Min.

USB-Eingang: 5 V 

Temperatur: 15°C – 45 °C



Stand: 2023-11

Hergestellt in China

 Hergestellt für:

aspiria nonfood GmbH

Lademannbogen 21-23

22339 Hamburg

Deutschland

Modell-Nr.: ANS-23-123